

Odstraňuje napětí při zhotovování výplní kavit II. třídy

- ✓ Předvídatelně těsné kontakty
- ✓ Těsný uzávěr při dásních
- ✓ Méně dokončování, méně leštění
- ✓ Snadno použitelný systém

Zesílený okraj matrice pro ideální anatomii

Gingivální kryt za účelem prevence vzniku mezer v gingiválně-axiálním růžku



EZ potah matric Palodent® V3
Mikro-tenký, nepřilnavý potah pro neuvěřitelně snadné odstraňování matrice. Barevné odlišení z důvodu rychlé identifikace velikosti.



Větší zakřivení: Matrice zub obalí

Silné NiTi kroužky pro vynikající pevnost pružení a paměť, až 1000x sterilizovatelné v autoklávu



Univerzální pro moláry




Úzké pro premoláry

Úchytky pro snadné vkládání a vyjímání

Skleněným vláknem vyztužené plastové okraje jsou ve tvaru písmene V, aby držely klínek

Otvory pro pinzetu pro snadné umisťování a vyjímání klínku


Chybějící hrbolek

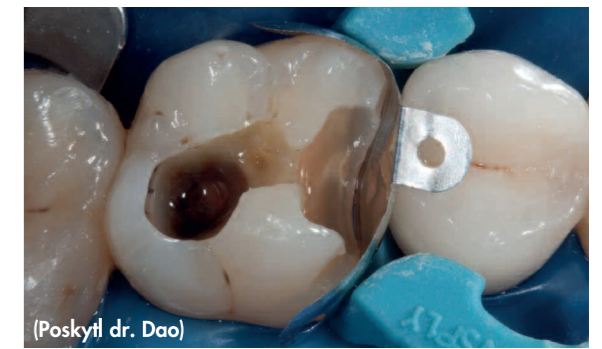

MOD



Na sebe kladené klínky při ošetření parodontologického případu

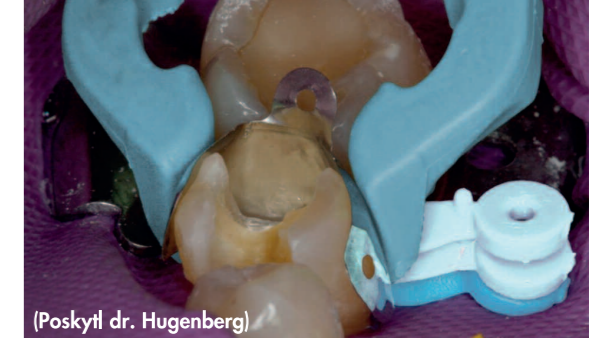

Rozsáhlá výplň



Interaktivní kroužky a klínky



CHYTRÉ KLÍNKY S OCHRANNOU CLONOU

- + Snižují riziko aproximálního poškození sousedního zubu
- + Rychlejší a snazší preparace kavity
- + Clonu lze po preparaci odstranit a klínek nechat na místě



ANATOMICKÉ KLÍNKY

- + Jemná komprese a rozšíření pro snadné umístění a utěsnění
- + Zúžení na spodní straně umožňuje umístění druhého klínku z protější strany



MATRICE S ÚCHYTKOU A POTAHEM

- + 3,5 mm: Pediatrická a konzervativní preparace u premolárů
- + 4,5 mm: Středně velké preparace u premolárů
- + 5,5 mm: Nejběžnější velikost pro kavity II. třídy v molárech
- + 6,5 mm/7,5 mm: Hluboké a široké preparace, rekonstrukce hrbolků u molárů



ŠIKOVNÉ KLEŠTĚ

- + Funkce zajištění a zahnutá uchopovací ramena kroužek pevně drží
- + Hroty s drážkami pro úpravu tvaru kroužků



SPECIÁLNÍ PINZETA S PINEM

- + Hrot s pinem přesně pasuje do otvoru v matrici a klínku pro přesnou kontrolu
- + Přirozeně zavřená pozice: Menší riziko upuštění matrice nebo klínku
- + S kulatým cpátkem v hrotu

